

VI. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ERROR	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
01	Sensor de presión de aire	El equipo se habrá encendido con una envoltura inflada conectada. Apague el equipo, desconecte la envoltura y vuelva a encenderlo.
02	Error bomba de aire	Desconecte la envoltura, apague el equipo y vuelva a encenderlo sin una envoltura conectada.
04	Bomba seca	Asegúrese de que haya agua en el depósito, de que el filtro no esté obstruido y de que ni la manguera o el envoltorio estén enroscados. Desconecte la manguera por completo y vuelva a conectarla.
06	Presión excesiva	Apague el equipo y vuelva a encenderlo. Aplique la envoltura de forma más ceñida o aplique una diferente.
07	Presión deficiente	Asegúrese de que la envoltura quede bien ceñida; para aislar el problema, utilice una envoltura y manguera diferentes.
08	Error de desinflamiento	Apague el equipo. Desconecte la envoltura de la manguera y extraiga el aire manualmente. Vuelva a conectarla y a aplicarla al cuerpo. Encienda el equipo.
09	Error funcionamiento de la bomba	Compruebe que el filtro no está obstruido. Apague el equipo durante 20 minutos (para que se enfríe la bomba) y vuelva a encenderlo.
10	Flujo bajo	Compruebe las conexiones de la manguera. Asegúrese de que haya agua en el depósito, de que el filtro no esté obstruido y de que ni la manguera o el envoltorio estén enroscados. Desconecte la manguera por completo y conéctela.
12	Error circuito hidráulico	Desconecte la envoltura, apague el equipo y vuelva a encenderlo sin una envoltura conectada.

Si el equipo no se enciende, compruebe que el cable esté bien enchufado y a un enchufe activo. Pulse el botón de encendido; si se enciende la luz naranja, pero no se enciende el equipo, póngase en contacto con **Recoverylab España**; si no se enciende ninguna luz, compruebe que el enchufe tenga corriente.

**SI ALGUNO DE ESTOS PROBLEMAS PERSISTE, PÓNGASE EN CONTACTO CON
Recoverylab España: 610566972 · 679765173 · 913991638**


recoverylab

recoverylab



GAME READY®

I. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


A) PREPARACIÓN DEL SISTEMA GAME READY

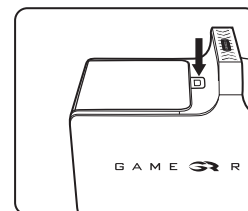


1 Pulse el botón de apertura de la puerta del depósito de hielo para abrirla

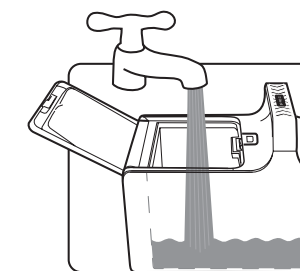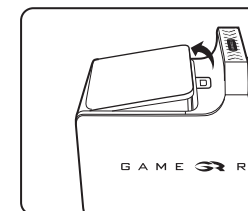


2 Añada agua hasta la línea de llenado azul indicada en el interior

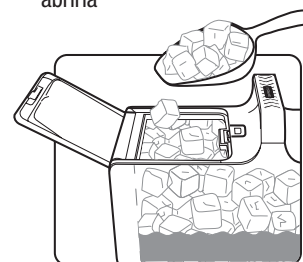


3 Añada hielo en el depósito

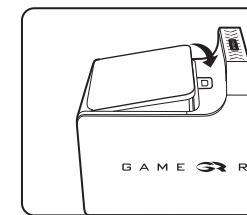


4 Cierre la tapa hasta que escuche el chasquido

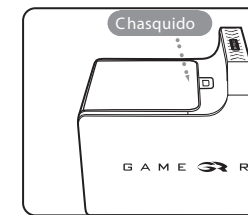




5 Coloque la unidad en una superficie plana para evitar pérdidas de agua

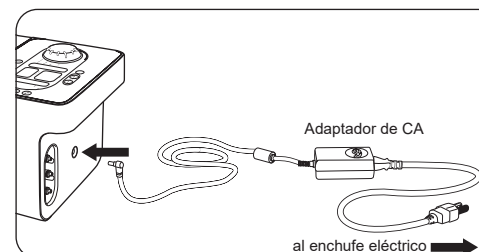

6 Conecte el la unidad control a la corriente

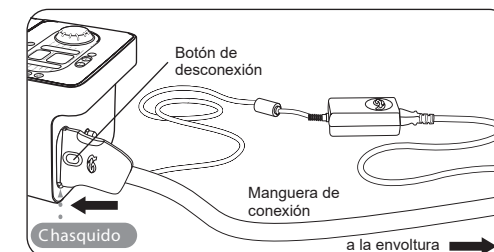


7 Conecte la manguera de conexión a la unidad control

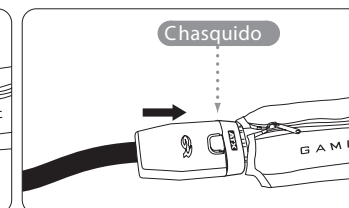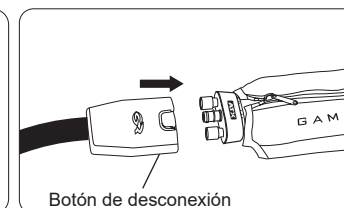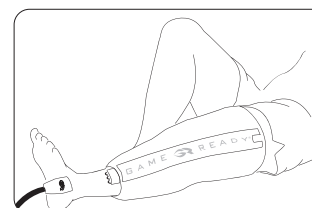


8 Aplique la banda a la articulación que vaya a ser trata y posteriormente conéctele la manguera

B) PUESTA EN MARCHA

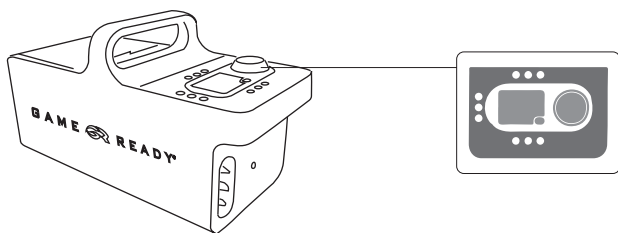

MODO MANUAL

1) Pulse el botón de encendido

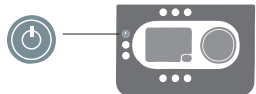

2) Seleccione el tiempo




3) Seleccione la presión



4) Ajuste la temperatura deseada




5) Inicie el tratamiento

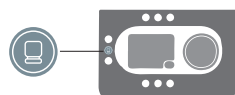


MODO AUTOMÁTICO

1) Pulse el botón de encendido programa

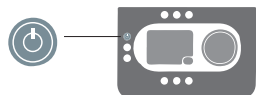

2) Pulse el botón de programa

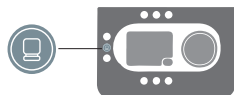


3) Seleccione el programa




4) Ajuste la temperatura deseada



5) Inicie el tratamiento

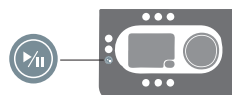


	PROGRAMA	T. FUNCIONAMIENTO	T. INACTIVIDAD	PRESIÓN
 TABLA DE PROGRAMAS AUTOMÁTICOS	1	30 minutos	30 minutos	nula
	2	30 minutos	30 minutos	baja
	3	30 minutos	30 minutos	media
	4	30 minutos	60 minutos	nula
	5	30 minutos	60 minutos	baja
	6	30 minutos	60 minutos	media

NOTA: Si desea cambiar la presión o añadir más hielo pulse la tecla Play y el tratamiento se suspenderá. Para reiniciarlo vuelva a pulsar la tecla Play.

NOTA: Compruebe cada cierto tiempo el nivel de frío del agua. En el caso de que tuviera que añadir más hielo, asegúrese de dejar la cantidad de agua indicada en el interior de la máquina.

II. BOLSA ISOTÉRMICA

La bolsa de transporte funciona como aislante térmico. Puede dejar la máquina en funcionamiento dentro de la bolsa para retrasar el deshielo. Para ello, saque el cable de corriente y la manguera por la apertura lateral de la bolsa.

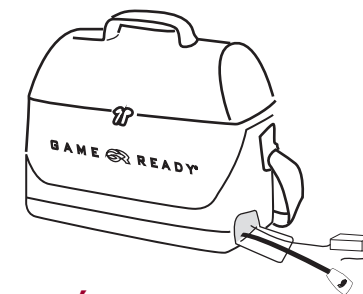

III. MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA

Recuerde, cuando la máquina no esté en funcionamiento:

- 1) Vacíela y deje la tapa abierta
- 2) Desconecte la manguera y la banda (abra la cremallera y extiéndala) y deje que se ventilen
- 3) No exponga la unidad de control a la luz directa del sol
- 4) Asegúrese de entregar la máquina completamente vacía y seca, y de que contenga el manual y todos los accesorios

NOTA: Para sesiones de larga duración, reemplace el agua por hielo periódicamente. Cuando lo haga, asegúrese de mantener siempre el nivel de agua indicado en el interior.

IV. DEVOLUCIÓN DE LA MÁQUINA

Antes de devolver la máquina, asegúrese de que el compartimento del agua/hielo esté vacío y todos los accesorios secos y ventilados.

V. TRATAMIENTO RECOMENDADO

MANUAL:	AUTOMÁTICO:
TEMPERATURA:	TEMPERATURA:
TIEMPO:	PROGRAMA:
PRESIÓN:	SESIONES:
SESIONES:	
COMENTARIOS:	